

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o neinvazivním prenatálním testu PANORAMA, který Vám nabízí Bioptická laboratoř. Tento test umožňuje spolehlivou detekci nejčastějších aneuploidií a mikrolečních syndromů z krve těhotné ženy už od ukončeného 9. týdne těhotenství!

Test nabízí pacientkám 3 diagnostické panely:

TEST	ABERACE	VŠECHNY PANELY
Základní panel	Aneuploidie chromosomů 13, 18, 21 Aneuploidie pohlavních chromosomů (monosomie X, XXX, XXY, XYY) Triploidie / Syndrom mizejícího dvojčete	+ pohlaví* (volitelně)
Základní panel + DiGeorgův syndrom (delece 22q11.2)	Obsah základního panelu + DiGeorgův syndrom	
Rozšířený panel (mikrolece)	Obsah základního panelu + DiGeorgův syndrom (delece 22q11.2) Syndrom delece 1p36 Angelmanův syndrom Prader-Williho syndrom Syndrom Cri-du-chat (syndrom kočičího křiku)	

*pohlaví dítěte oznámí lékař pacientce po ukončeném 12. týdnu těhotenství

Bližší informace o testu:

- o přiložené letáky: velké letáky jsou určené pro lékaře a odborníky, malé letáky jsou pro Vaše pacientky
- o internet: www.panoramatest.cz a www.gynekolog.cz/panorama

Možnosti platby:

- o pacientka zaplatí test v ambulanci a lékaři je na konci měsíce vystavena faktura
- o pacientka zaplatí test na účet laboratoře (pro podrobné informace kontaktujte laboratoř)

Výsledky testu budou dodané do 10 pracovních dnů.

Skladování tesu:

- o viz instrukce výrobce <https://www.streck.com/ifu/>

Bioptická laboratoř s.r.o.

Mikulášské náměstí 628/4 | 326 00 Plzeň | IČ: 49197827 | DIČ: CZ49197827
tel.: 373 035 500, 603 83 53 53, 603 84 66 44 | e-mail: biopticka@biopticka.cz

www.biopticka.cz

Potřebné instrukce k provedení PANORAMA testu:

- Vyplnit **informovaný souhlas** a v jeho **dolní části** vyplnit **žádanku ke genetické konzultaci** (2 kopie: jedna pro genetika a druhou donese těhotná později k náběru).
Pacientku poslat s informovaným souhlasem na některé z těchto genetických pracovišť (<http://www.gynekolog.cz/panorama/spolupracujici-genetici>)

- Vyplnit **žádanku** a spolu s podepsaným **informovaným souhlasem** a **zkumavkami s krví v originálním obalu** odeslat do Bioptické laboratoře.

Informovaný souhlas a žádanka ke stažení na <http://www.gynekolog.cz/panorama/ke-stazeni>


Správný odběr krve pro PANORAMA test

- Odběr provádět **v den svozu** do Bioptické laboratoře anebo **jeden den předem**. Pro odběr a transport v jiném termínu je možné využít přepravnou službu, kterou však hradí objednavatel.

Pacientka nemusí být při odběru na lačno.

Odběr může vykonávat muž i žena.


- Do **obou** dodaných zkumavek nabrat **8 - 10 ml krve** (na vyšetření je potřebné celkem 16 - 20 ml).
- Zkumavky **neotevírat!!**

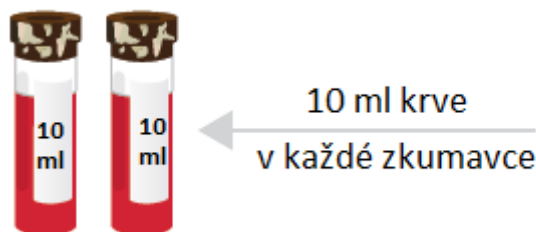

- Odběr provádět **podtlakovou jehlou**.

V případě, že podtlaková jehla není k dispozici, odebrat 20 ml krve do konvenční injekční stříkačky, propíchnout víčko a krev vstříknout postupně do obou zkumavek.

Odběrové jehly typu „motýl“ NEPOUŽÍVAT!!

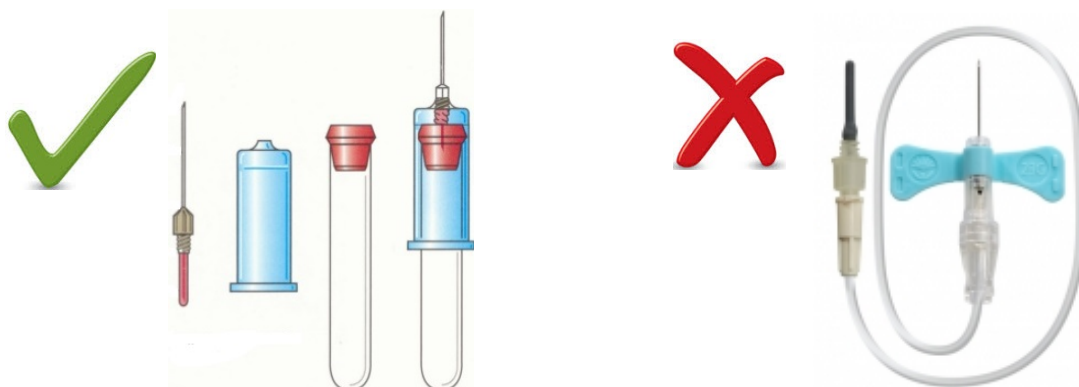


Bioptická laboratoř s.r.o.

Mikulášské náměstí 628/4 | 326 00 Plzeň | IČ: 49197827 | DIČ: CZ49197827
tel.: 373 035 500, 603 83 53 53, 603 84 66 44 | e-mail: biopticka@biopticka.cz

www.biopticka.cz

- Zkumavky po odběru **jemně 8 - 10 krát přetočit** o 180 stupňů.

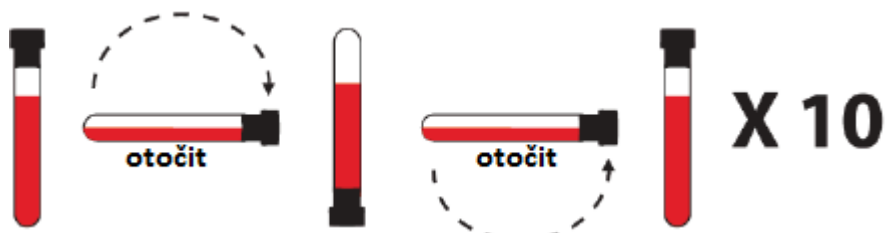

- Obě dvě zkumavky popsat jménem a rodným číslem pacientky.
- Obě zkumavky vložit do dodaného obalu a uchovávat při **pokožové teplotě**.
Nedávat do lednice!!!

V případě dotazů nás kontaktujte na našem dispečinku, tel. +420 373 035 500

S pozdravem

tým Bioptické laboratoře